

# *Zg* TEST DI GRAVIDANZA

AFFIDABILE, PRECOCE, RAPIDO, SEMPLICE

Dispositivo ad uso Autodiagnostico

## PRINCIPIO

Il test di gravidanza è stato progettato per essere utilizzato per una determinazione qualitativa della gonadotropina corionica umana nelle urine per aiutare a individuare la gravidanza precoce. L'ormone si verifica circa una settimana dopo la fecondazione e può essere trovato durante la gravidanza nelle urine della donna. Il test di gravidanza ha una sensibilità di 25 mIU / ml e può essere eseguito circa 7 giorni dopo la sospetta concezione. Si consiglia di effettuare il test dal primo giorno in cui dovrebbero comparire le mestruazioni per ottenere più del 99% di precisione.

## PRECAUZIONI

Leggere attentamente tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo prima di eseguire la prova.

- Non utilizzare se l'involucro di alluminio è strappato o danneggiato.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Conservare in luogo asciutto a 2-35 ° C ma non congelare.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per uso esterno.
- Non riutilizzare.


## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Immediatamente prima di effettuare la prova, aprire l'involucro e prelevare il test.
2. Rimuovere il cappuccio.
3. Tenere il test a metà del manico con il tampone assorbente rivolto verso il basso direttamente nel flusso urinale per almeno 2-3 secondi finché non è completamente umido. Quindi rimuovi il test dalla tua urina.
4. Rimettere il cappuccio sopra il tampone assorbente e posizionare il test su una superficie piana con la finestra di prova rivolta verso l'alto e quindi iniziare a conteggiare il tempo.
5. A seconda della concentrazione di hCG, il risultato positivo può essere osservato in appena 40 secondi. Tuttavia, per confermare il risultato negativo, è necessario un tempo di reazione completo di 5 minuti.
6. Dopo aver eseguito il test, provvedere ad eliminare il dispositivo attenendosi alla normativa locale. Non leggere il risultato dopo 15 minuti.



*Nota: Se si preferisce è possibile raccogliere un campione di urina in un contenitore pulito e asciutto, quindi immergere solo il puntale di campionamento del test nell'urina per almeno 10 secondi, rimuovere il test dal campione di urina. Quindi seguire i passaggi 4,5,6.*

Figura 1

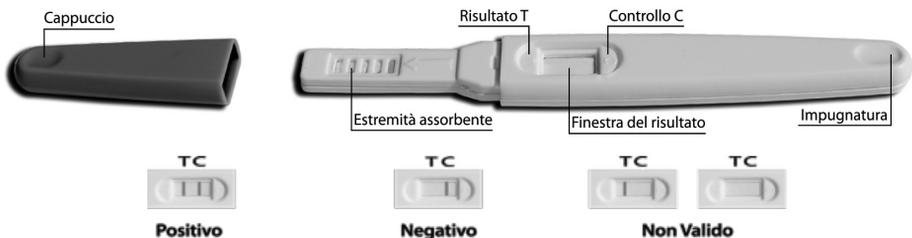

## INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI (vedi figura 1)

**POSITIVO:** Appaiono due linee rosse distinte. Una linea appare nella finestra di controllo (C) e una linea nella finestra di prova (T). Sei incinta.

**NOTA:** Anche se la linea della finestra di prova (T) è più leggera della linea nella finestra di controllo (C) il risultato è positivo.

**NEGATIVO:** una linea rossa compare nella finestra di controllo (C). Nessuna linea viene visualizzata nella finestra di prova (T). Non sei incinta.

**NON VALIDO:** la linea di controllo (C) non viene visualizzata. (Anche se compare la linea nella finestra di prova (T)). Rivedere la procedura e ripetere la prova con un nuovo dispositivo di prova.

*NOTA: Il livello di campione insufficiente o le tecniche procedurali non corrette sono i motivi più probabili per la mancanza della linea di controllo.*

## INSTRUCTIONS

1. Remove the midstream test from the foil pouch and familiarize yourself with the product.
2. Remove the Cap and place it over the Thumb Grip. See illustration above.
3. Hold the midstream test by the capped Thumb Grip with the exposed Absorbent Tip pointing downward directly into your urine stream for at least 2-3 seconds until it is thoroughly wet.
4. After removing the midstream test from your urine, immediately replace the Cap over the Absorbent Tip, lay the midstream test on a flat surface with the Result Window facing upwards, and then begin timing.
5. As the test begins to work, you may notice a light colored flow moving across the Result Window. Read the result at 5 minutes. If no colored line appears, wait one minute longer. Some positive results may be observed in 1 minute or less depending on the concentration of hCG. Do not read the result after 15 minutes.

## MODE D'EMPLOI

1. Retirer l'applicateur du sachet aluminium et se familiariser avec le produit.
2. Retirer le Capuchon. Voir illustration ci-dessus.
3. Tenir l'applicateur par le Manche de l'applicateur et diriger la Mèche Absorbante directement dans le jet d'urine pendant au moins 2-3 secondes, jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée.
4. Retirer l'applicateur du jet d'urine, replacer immédiatement le Capuchon sur la Mèche Absorbante, poser l'applicateur sur une surface plane avec les fenêtres Test et Contrôle orientées vers le haut et commencer le comptage des minutes.
5. Lorsque le test commence à prendre effet, une bande rouge claire se déplace vers le fenêtre de Test et de Contrôle. Lire le résultat au bout de 5 minutes. Si aucune ligne colorée n'apparaît, attendre encore 1 minute. Certains résultats positifs peuvent se manifester en moins d'1 minute selon la concentration de hCG. Ne pas lire le résultat au-delà de 15 minutes.

## DOMANDE E RISPOSTE

1. D: Come funziona il test di gravidanza?

R: Il test di gravidanza rileva un ormone nelle urine che il tuo corpo produce durante la gravidanza.

2. D: Dopo quanto tempo dal sospetto di essere incinta posso utilizzare il test di gravidanza?

R: È possibile testare la tua urina già 7 giorni dopo la concezione, ma per ottenere più del 99% di precisione eseguire la prova il primo giorno in cui dovrebbero comparire le mestruazioni.

3. D: Devo provare con l'urina del primo mattino?

R: Anche se è possibile testare in qualsiasi momento della giornata, il primo campione di urina della mattina è di solito il più concentrato e contiene una maggiore concentrazione dell'ormone hCG.

4. Q: Quanto è preciso il test di gravidanza?

R: In studi clinici e di laboratorio, l'efficacia del test di gravidanza è stata dimostrata più alta del 99% se si seguono esattamente le istruzioni.

5. Q: Quali fattori possono influenzare il risultato del test?

R: I farmaci che contengono l'ormone hCG possono dare un falso risultato positivo. Anche l'alcool può interferire con il risultato del test (la linea C e T sono più chiari di quella senza alcool). Non è consigliabile utilizzare il test dopo aver bevuto.

I contraccettivi orali, antidolorifici, antibiotici o terapie ormonali che non contengono hCG non influiscono sul risultato del test.

6. D: Cosa devo fare se il risultato dimostra che sono incinta?

R: Significa che dovresti consultare il medico per confermare di essere incinta. Il test di gravidanza determina solo la presenza dell'ormone hCG nelle urine. Solo il medico può confermare la gravidanza e come procedere correttamente.

7. Q: Il risultato positivo può indicare qualcosa di diverso dalla gravidanza normale?

R: Un certo numero di condizioni mediche diverse dalla gravidanza, compresa la cisti ovarica o la gravidanza ectopica (gravidanza all'esterno dell'utero) e anche qualche tipo di cancro possono causare livelli elevati dell'ormone hCG.

8. D: Come faccio a sapere che il test di gravidanza è stato eseguito correttamente?

R: Se una linea rossa compare nella finestra di controllo (C), puoi essere sicura che il test sia stato eseguito correttamente.

9. D: Cosa devo fare se il risultato dimostra che non sono incinta?

R: Significa che nessun ormone hCG è stato rilevato nelle urine e probabilmente non sei incinta. Se non si avviano le mestruazioni entro 2 o 3 giorni dalla data in cui dovrebbero comparire, ripetere la prova con un nuovo test. Se ricevi lo stesso risultato dopo aver ripetuto il test e ancora non compaiono le mestruazioni, dovresti consultare il medico per trovare la ragione.

## LIMITAZIONI

Il test di gravidanza rileva solo la presenza di hCG nelle urine. Il valore quantitativo di hCG non può essere determinato da questo test qualitativo. Tutti i risultati devono essere confermati dal medico.

Possono verificarsi falsi risultati negativi quando i livelli di hCG sono al di sotto del livello di sensibilità del test. Quando la gravidanza è ancora sospetta, rifare il test 48 ore dopo con un campione della prima urina della mattina.

Utilizzare il Test entro un'ora dall'apertura.



Fabbricante:  
LOGITER ONE S.R.L.  
Via dei Carpinì 3/b  
40011 Anzola dell'Emilia (BO), Italy

 chemist's research

Selezionato da:  
Chemist's Research S.r.l. ITALY  
[www.chemistresearch.it](http://www.chemistresearch.it)



0123



Rev. 2 October 2020